

R·RUI 



家庭HOME 呼吸护理



Product Catalogue



HOME RESPIRATORY CARE

家庭呼吸护理



HOME
RESPIRATORY
CARE

目录

CONTENTS

Home Respiratory Care

CPAP 呼吸面罩	01
-----------	----

CPAP 口鼻罩	02
----------	----

CPAP 鼻罩	04
---------	----

CPAP 加热呼吸管路	06
-------------	----

CPAP 呼吸机湿化罐	09
-------------	----

CPAP 面罩头带	10
-----------	----

空气过滤棉	12
-------	----

CPAP 可调节呼吸管路支架	15
----------------	----

口鼻气雾剂给药器	16
----------	----

口鼻气雾剂给药器	17
----------	----

CPAP ARTIFICIAL VENTILATION MASKS

CPAP 呼吸面罩



CPAP 口鼻罩

CPAP 口鼻罩用于治疗睡眠呼吸暂停、打鼾及其他睡眠相关呼吸问题。全脸设计同时覆盖鼻子和嘴巴，佩戴者可通过任意一种方式呼吸。面罩材质柔软且具有可塑性，能轻松贴合患者面部；无前额架设计可实现出色的贴合度与密封性，为患者提供极佳的舒适度和治疗效果。



让舒适看得见、摸得到

褶皱式硅胶垫实现鼻梁处自适应调节。

可调节头带

调节能力更强，贴合头部，舒适稳定。

科学的排气孔设计

提高氧气利用率和二氧化碳排出效率，提高治疗效果。

快速释放机制

卡扣设计，可实现面罩从患者面部的快速拆卸，并确保最佳贴合度。

防窒息阀


在通风不足的情况下，可防止重复吸入呼出气体。

更舒适的体验

双层硅胶，轻松贴合人体面部，提高密封性和舒适性，提高舒适度。

万向旋转弯头


球窝式设计让治疗更自由。

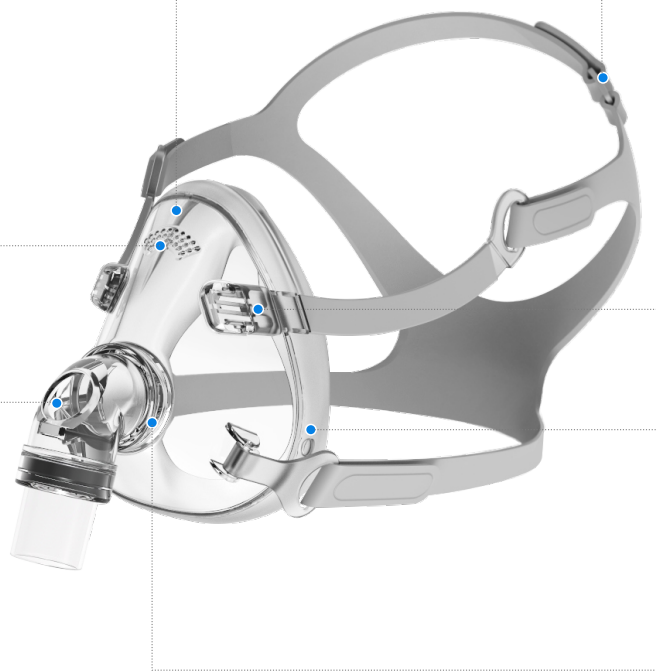

提升视野清晰度，同时不影响头带支撑性

轻便的框架，配合无前额支撑设计，让您的视野更加开阔，提高舒适感，同时整体重量更轻。无论是睡前看电视还是阅读，无遮挡的视野都能不受干扰地享受睡前活动。

产品性能

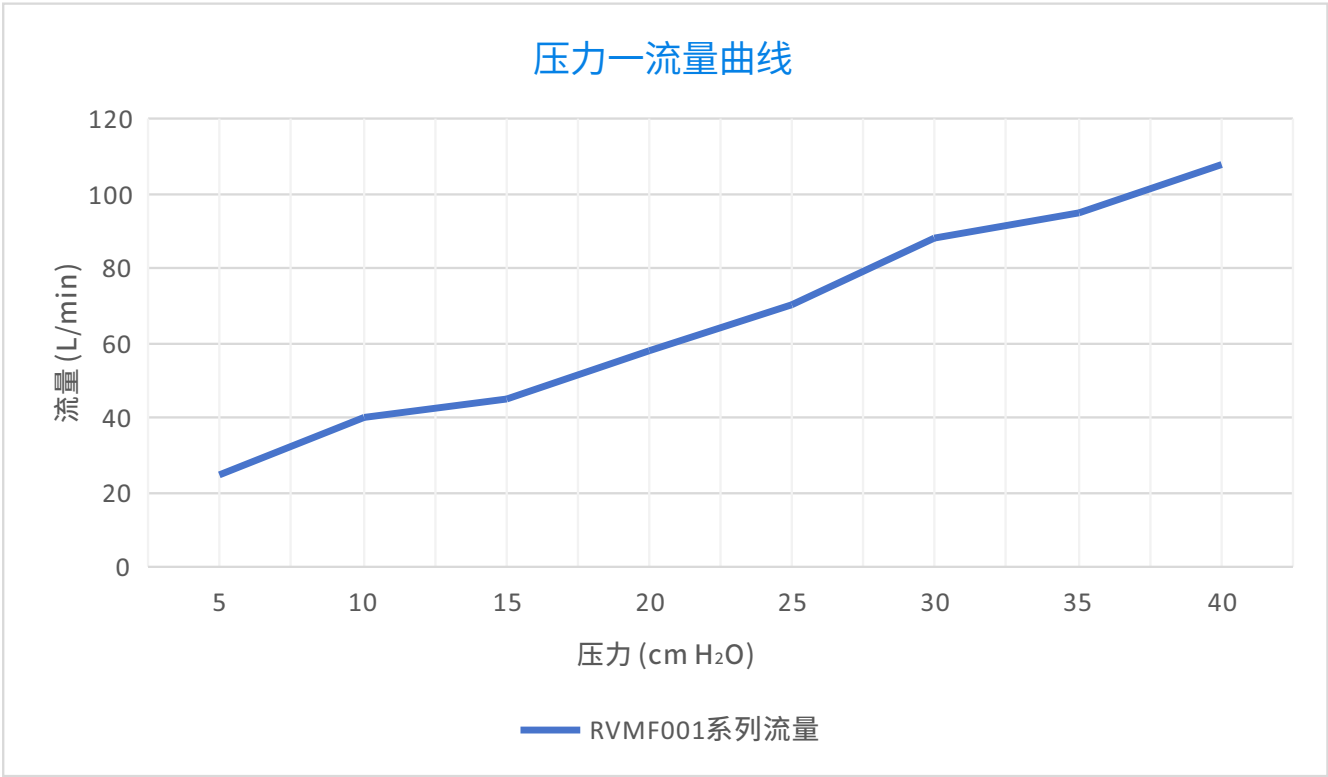

压力 (cm H ₂ O)	3	12	22	31	40
RVMF001系列流量(L/min)	23	43	60	89	108

注册证号:粤械注准20252080861

注册型号	产品编码	产品描述	装箱数量
RVMF001S	20602.00102.20001	CPAP 口鼻罩, 透明弯接头, 小号S	54
RVMF001M	20602.00103.20001	CPAP 口鼻罩, 透明弯接头, 中号M	54
RVMF001L	20602.00104.20001	CPAP 口鼻罩, 透明弯接头, 大号L	54

CPAP 鼻罩

这款鼻罩采用纤薄框架材质，减少面部贴合面积。非常容易为您提供可靠的密封，它可以帮助您佩戴时享受更好的睡眠，并且带给您独特的安静体验。

提高舒适感，提供开阔视野；快拆式头带魔术贴设计，可牢牢保持贴合度，无需反复调整；360°旋转弯头还能减少管路拖拽，让每一次夜间治疗都更简便、更安心。



立体褶皱式自适应衬垫

专为鼻梁设计的立体褶皱衬垫，能够自动适应面部轮廓，弹性贴合，减少漏气。

前额支架轻盈广视角

纤细支架降低负担，为用户提供宽阔视野兼顾舒适与便捷。

连接管

小短管缓冲主管路牵拉。

头带


具备可调节性与弹性，能为不同患者提供稳固贴合的佩戴效果。

多尺码设计易贴合

S、M、L三种尺寸衬垫可选，适应更广泛的用户需求，力求每位用户都能找到合适的尺寸。

环形分布排气孔稳定降噪


优化设计的排气孔有效降低噪音，避免了排气孔发生堵塞，减少对伴侣的睡眠干扰。

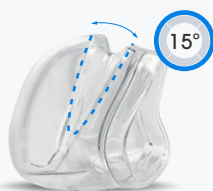

贴合自适应硅胶垫

硅胶垫片在鼻梁处设有褶皱设计。能够根据不同的面部类型自动调节贴合度，角度范围可达15°，这有助于更好地缓解高鼻梁的压力并提升佩戴体验。

产品性能

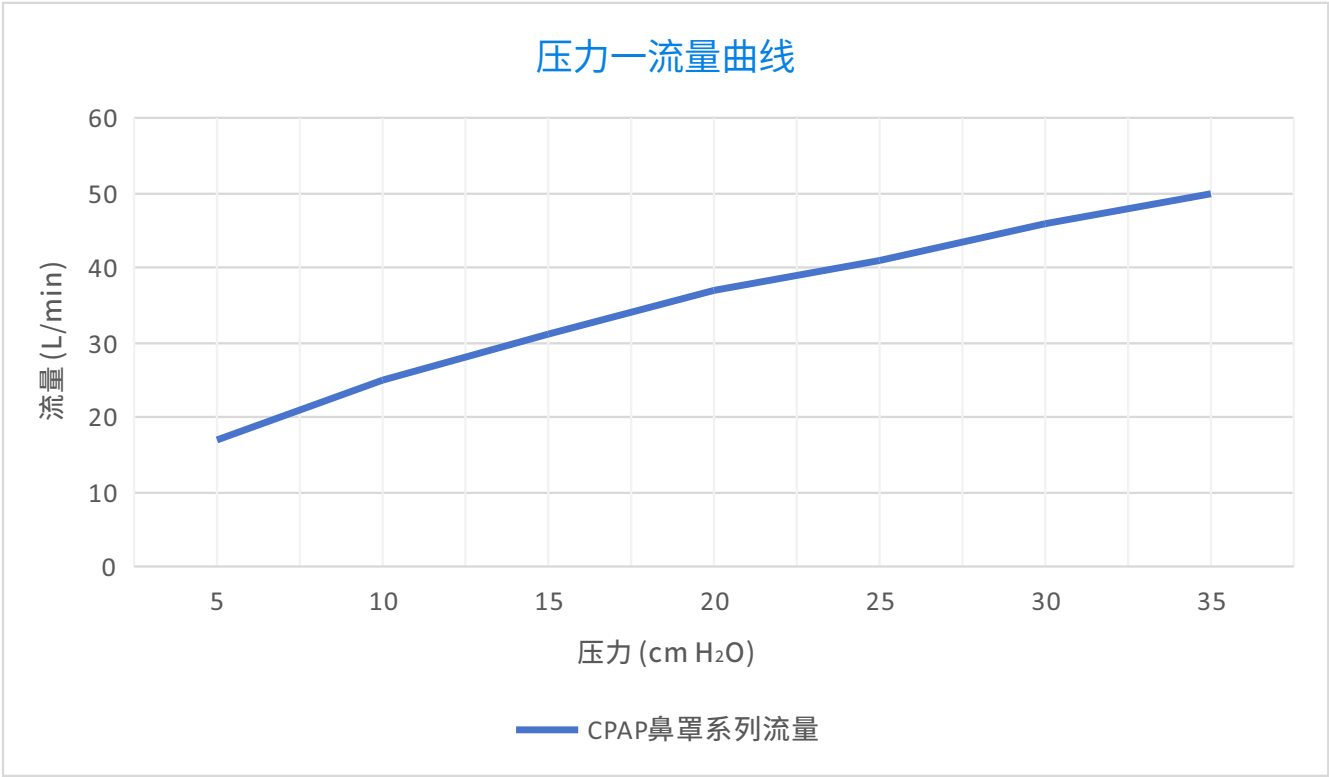

压力 (cm H2O)	5	10	15	20	25	30	35
RVMN001系列流量(L/min)	17	25	31	37	41	46	50

注册证号:粤械注准20252080518

注册型号	产品编码	产品描述	装箱数量
RVMN001S	20601.00101.21001	CPAP 鼻罩, 小号S	40
RVMN002M	20601.00202.21001	CPAP 鼻罩, 中号M	40
RVMN003L	20601.00303.21001	CPAP 鼻罩, 大号L	40

CPAP BREATHING TUBE

CPAP 加热呼吸管路




嵌入式加热丝的优势

管路内壁光滑，整个管路长度内嵌入加热丝，这有助于最大限度地防止气体温度损失，从而减少冷凝现象。

沿管壁360°均匀加热



传统的波纹管加热丝悬浮于管路内部，只能加热部分管路呼吸气体，导致管路蓄积大量冷凝水。

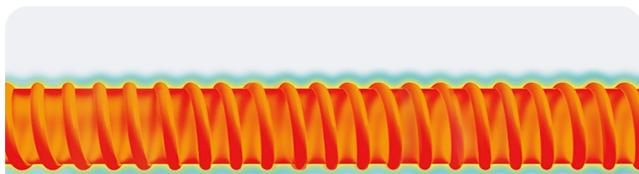

嵌入式螺旋加热丝贯穿整个管路，从外部到内部沿着管路的长度提供均匀加热效果。

- 管路360°全方位加热，几乎不产生冷凝水，避免细菌滋生
- 气阻更低，患者呼吸更顺畅
- 管路抗扭结，耐折耐压易储存

360°全方位加热

有效湿度管理，减少冷凝水。

临床信心


减少打开或断开回路的需要及相关的PEEP损失以及肺部塌陷^[1]。

有效温度传递

防止气体温度下降和表面冷点，最大限度地减少凝结冷凝水。

低顺应性导管

准确地向患者输送指定气体流速。

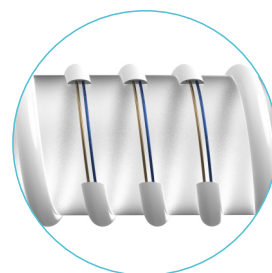


提高安全性

加强管路抗扭结，耐折耐压易储存。


降低风险

降低冷凝水意外进入患者呼吸道的风险^[2]。

可以集成2/3/4根
嵌入式螺旋加热丝

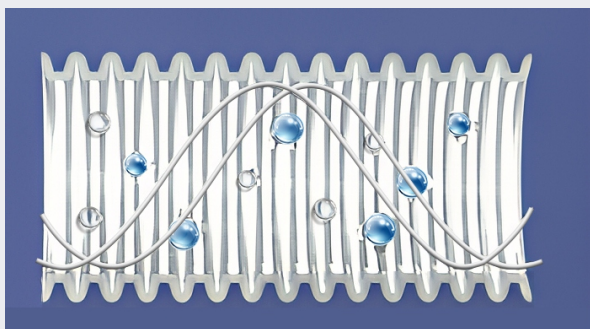

普通波纹加热丝回路，冷凝水在管路内部大量产生并蓄积。

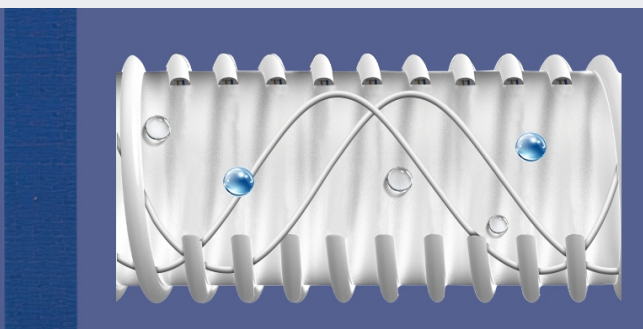

荣瑞嵌入式螺旋加热丝管路可减少冷凝水产生。

参考文献

- [1] Mallett, J.W Albarran, A Richardson. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Wiley Blackwell & Sons, Ltd. 2013.
- [2] AARC Evidence-based clinical practice guidelines: care of the ventilator circuit and its relation to ventilator-associated pneumonia. Respiratory Care 2003;48(9):869-879.

CPAP 加热呼吸管路

CPAP 加热呼吸管路用于连接CPAP呼吸机和面罩，形成串联回路。均匀分布的嵌入式缠绕加热丝，加热效率高，有效控制冷凝水生成，提供舒适的使用体验。加热功能可维持氧气从呼吸机到面罩全程的恒定舒适温度。



加热型



耐用型



防打结



轻盈


优化的冷凝水解决方案

有效控制冷凝水产生，保障安眠不受干扰。



加热温和

适当的加热功率设置，升温迅速，不干燥，提供持续舒适的呼吸体验。

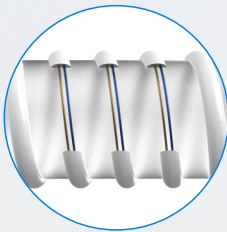

可集成 2/3/4 根螺旋嵌入式加热丝

注册证号：粤械注准20222081793

注册型号	产品编码	产品描述	装箱数量
RVTH007	20101.00700.20001	CPAP 加热呼吸管路, 内径: 15 mm	30

CPAP 呼吸机湿化罐

CPAP 呼吸机湿化罐底部设有加热板,能输出充足且稳定的湿度,有效提升CPAP治疗过程中的佩戴舒适度。

易操作

拆卸、加水、安装步骤简单,让每晚的准备流程轻松省心。

易维护



材质可进洗碗机清洗,方便清洁。

优质材料

优质材料制成,经久耐用,可应对日常使用。

密封性强

保证完美密封,有效防止泄漏,确保治疗始终处于最佳状态。

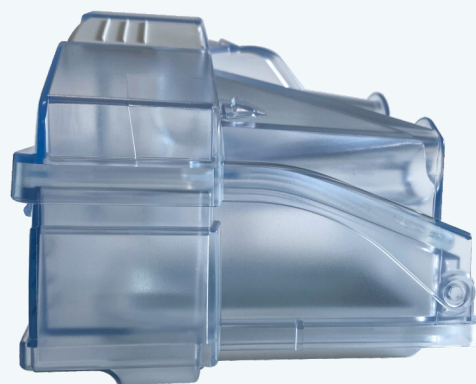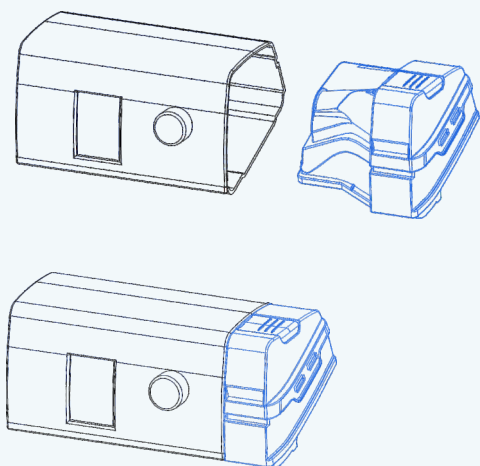

注册型号

产品编码

产品描述

装箱数量

RVS005

20705.00500.20602


CPAP 呼吸机湿化罐

36

CPAP 面罩头带

产品特点:

- 采用柔软度极佳的弹性纤维材质。
- 柔软舒适,能打造更顺滑的面部接触面。
- 透气、吸汗且耐用,满足长期使用需求。
- 可清洗,且清洗后不易磨损、卷边、掉毛。

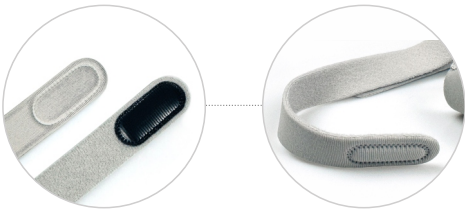

超声波焊接工艺

经超声波焊接的接缝更柔软,佩戴时舒适度更高。



兼容市场上多数产品

可兼容荣瑞产品及市场上同类产品,无需额外适配。

产品编码	产品描述	装箱数量
MAP0306	CPAP 面罩头带	500

可调节式头带

可适配不同患者，实现理想贴合效果。



产品编码	产品描述	装箱数量
MAP0331	CPAP 面罩头带	400

简约设计, 视野开阔

轻薄简约设计，减少头部覆盖面积，避免佩戴时的异物感与视线干扰。



可调节设计

选用日字扣，随意调节尺寸，无需担心滑落。




产品编码	产品描述	装箱数量
MAP0341	CPAP 面罩头带	600

空气过滤棉

空气过滤棉是所有呼吸机的重要部件，其作用是在空气被加压输送至用户的气道前对其进行净化。它不仅能保护用户的肺部，还能帮助维持呼吸机的完整性，延长机器使用寿命。

产品特点:

- 强大的净化能力:有效过滤空气中的悬浮颗粒,提供更纯净的气流。
- 维护便捷:采用一次性设计,更换操作简单,无需额外清洁步骤。
- 过滤效果更优:空气过滤棉可阻挡更多细微颗粒物与大颗粒杂质,致力于为用户提供洁净度更高的吸入空气。

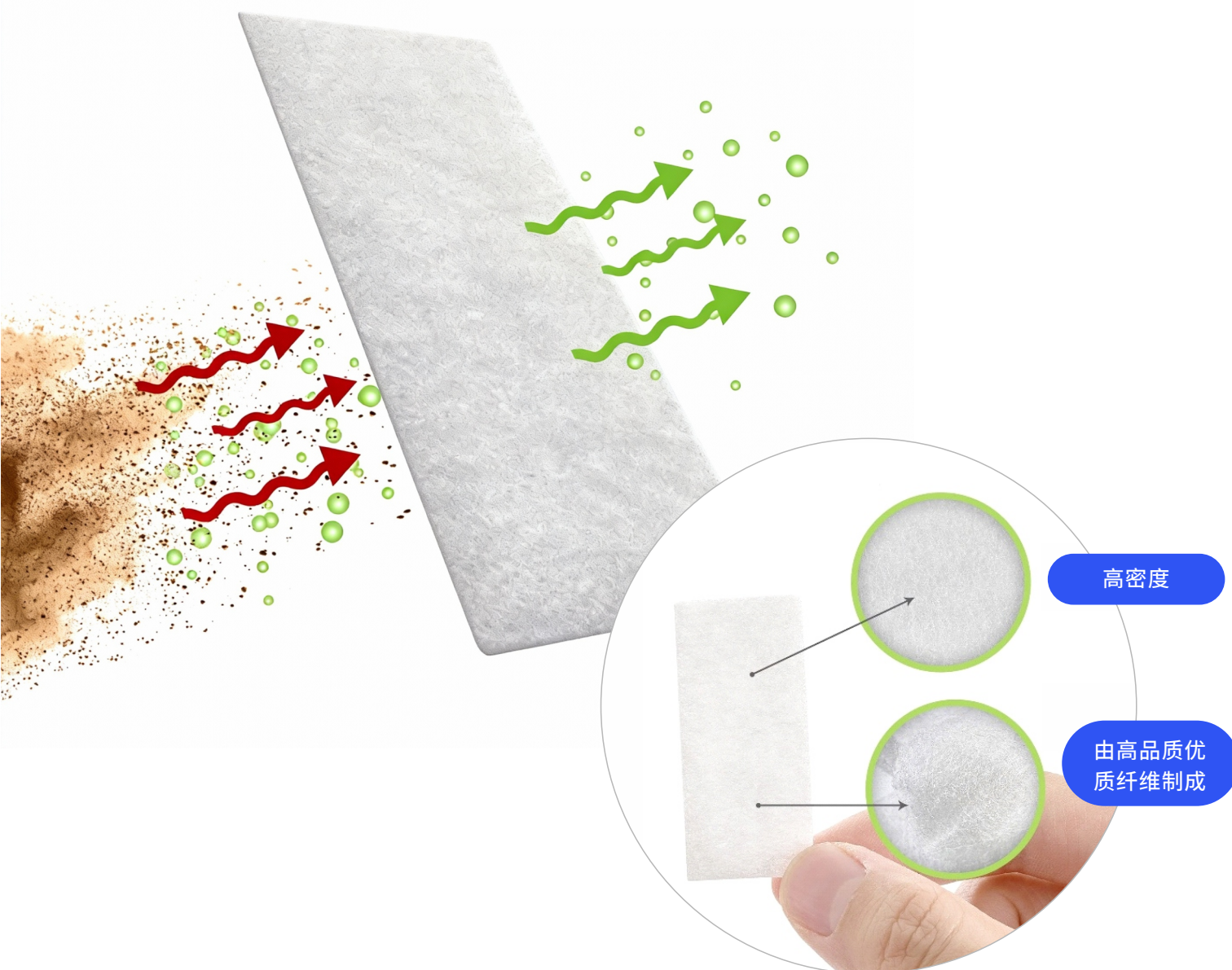

瑞思迈 S9 & S10 过滤棉




瑞思迈 AirMini 过滤棉



瑞思迈S11过滤棉



瑞思迈AirMini HumidX过滤器

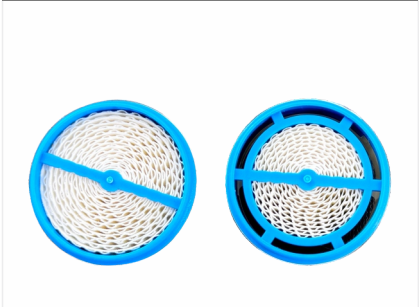

鱼跃YH-550/660呼吸机过滤棉



鱼跃制氧机过滤棉



万曼SOMNOvent呼吸机过滤棉



飞利浦 SleepEasy Series、M Series过滤棉



瑞迈特 M1 Mini过滤棉



瑞迈特GII/G2S/G3过滤棉



融听iBreeze 20A过滤棉



德百世呼吸机过滤棉



产品描述

空气过滤棉

费雪Airvo湿化治疗仪过滤棉



飞利浦DreamStation1 500T/700T、CNX500T17/700T17呼吸机过滤棉



万曼Prisma呼吸机过滤棉



万曼Balance呼吸机过滤棉



飞利浦V60呼吸机过滤棉



鱼跃YH-420/425/450/470/480/820/825/830/YH二代机呼吸机过滤棉



费雪SleepStyle呼吸机过滤棉



产品描述

空气过滤棉

CPAP 可调节呼吸管路支架

产品特点:

- **防止管路缠绕**
有效解决CPAP呼吸管路缠绕打结问题,显著减少睡眠时管路的牵拉拖拽,确保整夜安睡不受干扰。
- **可弯曲设计**
支架材质轻巧柔韧,可随意调节弯曲角度,轻松适配不同睡姿需求。
- **稳固管路夹**
管路夹可轻松夹住波纹管及螺纹管,且管路夹可旋转,内侧还贴合柔软防滑垫。
- **多种安装方式**
CPAP 管路支架配备带防滑内衬的可调节底座夹,可轻松安装在床头、床头柜等任意位置。



产品编码

MBG1581

产品描述

CPAP 可调节呼吸管路支架

ANTI-STATIC VALVED HOLDING CHAMBER (SPACER)

口鼻气雾剂给药器



口鼻气雾剂给药器

功能

口鼻气雾剂给药器专为呼吸困难患者或使用吸入器存在困难的患者设计,可帮助其更顺畅地吸入药物。该类设备可兼容市面上大多数定量气雾剂(pMDI),无需额外配件。给药器可选哨音功能,当用户吸入速度过快时,会发出提示音。

产品特点:

- 采用安全友好材质,可隔绝有害化学物质,保障用户的使用健康。
- 罐体抗静电,可减少吸入过程中的药物残留,提升用药利用率。
- 配备旋转式可拆洗部件,便于彻底清洁养护。
- 哨音功能,每一次呼气都充满信心,确保最佳药物输送。

本产品生产过程中未使用双酚A(BPA)或天然乳胶原料。

口含型设计

口含型设计符合解剖学设计,提高儿童治疗配合度。同时保护给药器内部免受杂质污染,避免异物进入。

pMDI 通用接口

通用插药口可适配所有临床常用的pMDI。



哨音功能

在呼吸过程中持续提醒患者,若操作技术不正确,音量会逐渐增加。帮助患者以最佳速率控制吸气节奏,确保药物沉积效果。

舒适面罩

面罩完美贴合面部轮廓,在实现有效密封的同时确保佩戴舒适。




低吸气流速


低阻力阀设计,减小吸气阻力,呼吸更轻松顺畅。

抗静电材质

罐体采用抗静电材质,能使气溶胶悬浮时间更持久,让患者有更充足的时间吸入药物。

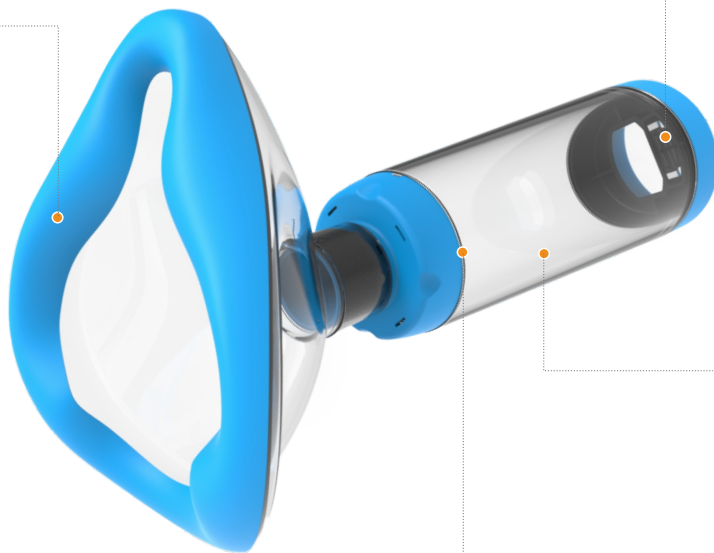


仅使用定量气雾剂（pMDI）

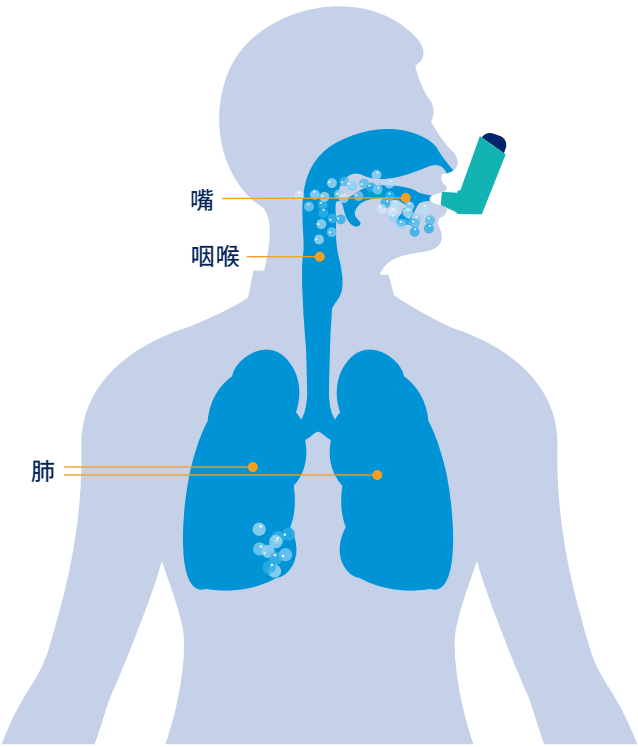

定量气雾剂（pMDI）喷出的药物速度可达每小时60英里，这可能导致药物直接撞击咽喉后部或上颌。

备案号:粤东械备20250079

使用pMDI搭配口鼻气雾剂给药器

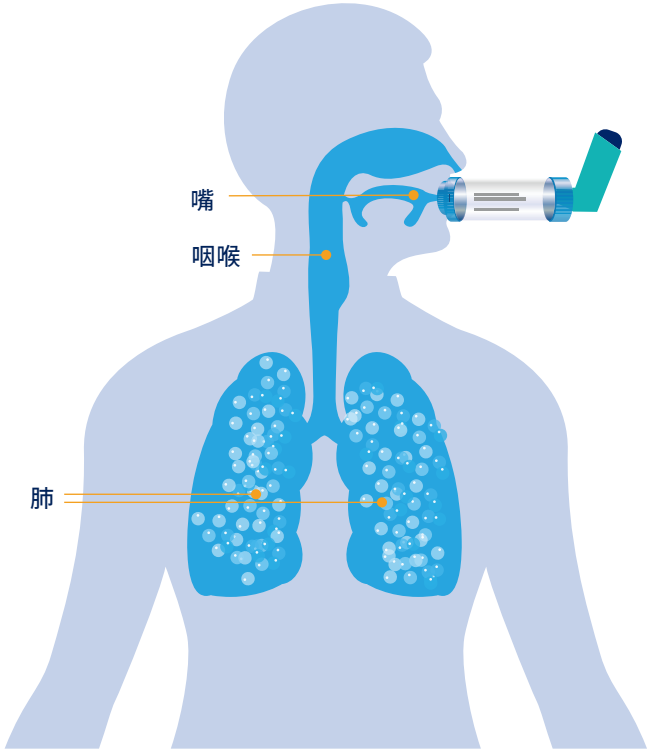

只需将口鼻气雾剂给药器与定量气雾剂（pMDI）连接，即可实现以下效果：

- 助力药物穿过口腔与咽喉，深入肺部发挥药效，提升药物利用效率。
- 无需同步协调“喷药”与“吸气”动作，降低用药操作难度。
- 防止药物吸入速度过快，确保药物在肺部充分沉积。
- 哮喘症状发作时，能更轻松地完成用药，帮助及时控制症状。

注册型号	产品编码	产品描述	装箱数量
RVC001	21001.00119.20601	口鼻气雾剂给药器，蓝色带面罩，小号S，罐体容量175ml	40
	21001.00124.20601	口鼻气雾剂给药器，蓝色带面罩带哨音，小号S，罐体容量175ml	40
	21002.00118.20601	口鼻气雾剂给药器，黄色带口含吸入盖，中号M，罐体容量175ml	140
	21002.00122.20601	口鼻气雾剂给药器，黄色带口含吸入盖和哨音，中号M，罐体容量175ml	140
	21002.00120.20601	口鼻气雾剂给药器，黄色带面罩，中号M，罐体容量175ml	40
	21002.00125.20601	口鼻气雾剂给药器，黄色带面罩带哨音，中号M，罐体容量175ml	40
RVC002	21003.00218.20601	口鼻气雾剂给药器，紫色带口含吸入盖，大号L，罐体容量225ml	140
	21003.00223.20601	口鼻气雾剂给药器，紫色带口含吸入盖和哨音，大号L，罐体容量225ml	140
	21003.00221.20601	口鼻气雾剂给药器，紫色带面罩，大号L，罐体容量225ml	40
	21003.00226.20601	口鼻气雾剂给药器，紫色带面罩带哨音，大号L，罐体容量225ml	40



北京荣瑞世纪科技有限公司

地址:北京市海淀区丰贤中路7号院
1号楼三层西区

Tel: +86 4008988660



东莞荣瑞医疗器械有限公司

地址:广东省东莞市松山湖园区桃园路1号
5栋101室

Tel: +86 769 22243880



Web: www.conruimedical.com www.r-rui.com



E-mail: info@conruimedical.com

A.0