

呼吸治疗解决方案

提供完整的呼吸耗材产品及解决方案



Product Catalogue



R-RUI 



HOSPITAL
RESPIRATORY

HOSPITAL RESPIRATORY CARE

呼吸治疗解决方案

提供完整的呼吸耗材产品及解决方案

HOSPITAL
RESPIRATORY CARE

目录CONTENTS

鼻氧管	01
鼻氧管(成人/儿童)	02
吸氧管(鼻塞型)	03
鼻氧管(婴儿)	04
吸氧管(气切型)	05
呼末二氧化碳采集吸氧管	06
加热呼吸管路套装	08
加热呼吸管路套装	09
湿化罐	11
无创呼吸面罩	12
加热呼吸管路套装	14
呼吸回路配件	21
转接头	22
Y型件	23
输液管	24

HIGH FLOW NASAL CANNULA



鼻氧管



高流量

鼻氧管 (成人 / 儿童)

荣瑞鼻氧管是有效高流量氧气治疗法 (HFOT) 的理想选择。对于患有轻度至中度呼吸窘迫综合征的患者，高流量氧气疗法可在减少呼吸功的同时改善氧合，无需在选定的患者群体中进行无创通气或插管^{[1][2]}。



高流量氧疗的优势:

- 改善氧合
- 减少分泌物产生
- 减少呼吸功
- 提高患者耐受性
- 避免插管^[1]

管路夹


可调节管夹能够减少阻力，固定并支撑鼻氧管和头带。

柔软鼻塞

舒适且耐受性良好的硅胶鼻塞，有助于提高患者依从性。

转接头

专利设计，15/22mm多口径转接头，可连接市面上大部分不同尺寸管路。

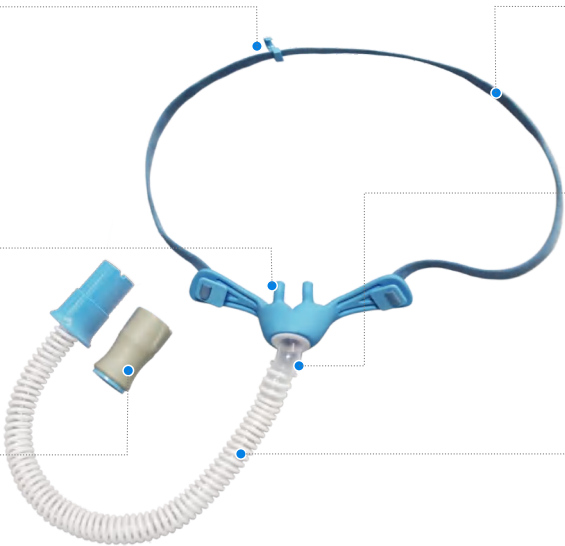

舒适头带

灵活的设计有助于减轻压力，提升舒适度。

360°旋转弯头

专利设计，避免压迫患者面部造成不适，也能够防止鼻氧管出现弯折。360°旋转弯接头，患者可自由躺、卧。

螺纹管路

为呼吸系统提供静音、灵活的连接。

备案号:粤东械备20190037号

注册型号	产品编码	产品描述	最大流量	气流阻力(40L/min)	装箱数量
RVL001S	20501.00302.21001	鼻氧管, 小号S, 带转接头	60 L/min	< 13.5 cmH ₂ O	100
	20501.00102.20001	鼻氧管, 小号S, 不带转接头			100
RVL001M	20501.00303.21001	鼻氧管, 中号M, 带转接头	70 L/min	< 8.5 cmH ₂ O	100
	20501.00103.20001	鼻氧管, 中号M, 不带转接头			100
RVL001L	20501.00304.21001	鼻氧管, 大号L, 带转接头	80 L/min	< 6.0 cmH ₂ O	100
	20501.00104.20001	鼻氧管, 大号L, 不带转接头			100

参考文献

【1】 Wettstein RB, Shelledy DC, Peters JI. Delivered Oxygen Concentrations using low-flow and high-flow nasal cannulas. Respir Care 2005;50 (5): 604-9.
【2】 Miller, Kenneth. High Flow Oxygen: Does It Make a Difference? RT Magazine. Sept 2013.

高流量

鼻氧管 (鼻塞型)

高流量氧疗 (HFOT) 已成为低氧血症型呼吸衰竭患者呼吸支持的关键模式, 与传统的氧气疗法相比, HFOT被认为具有许多益处。



螺纹管路

为呼吸系统提供静音、灵活的连接。

管路夹

可调节管夹能够减少阻力, 固定并支撑吸氧管和头带。

鼻塞


有三种尺寸且外形柔软贴合, 提供最佳的性能、舒适度和贴合感。

转接头

专利设计, 15/22mm多口径转接头, 可连接市面上大部分不同尺寸管路。

舒适头带

灵活的设计有助于减少压力, 增加舒适度, 提高患者的耐受。

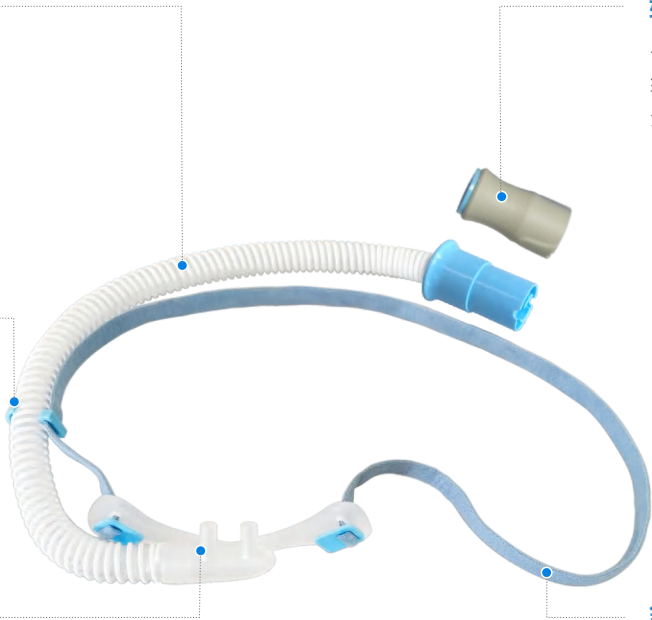

备案号: 粤莞械备20210007号

注册型号	产品编码	产品描述	最大流量	气流阻力(40L/min)	装箱数量
RVQ001S	20502.00102.20001	吸氧管鼻塞型, 小号S, 带转接头	60 L/min	< 13.5 cmH ₂ O	90
	20502.00102.21001	吸氧管鼻塞型, 小号S, 不带转接头			90
RVQ001M	20502.00103.20001	吸氧管鼻塞型, 中号M, 带转接头	70 L/min	< 8.5 cmH ₂ O	90
	20502.00103.21001	吸氧管鼻塞型, 中号M, 不带转接头			90
RVQ001L	20502.00104.20001	吸氧管鼻塞型, 大号L, 带转接头	80 L/min	< 6.0 cmH ₂ O	90
	20502.00104.21001	吸氧管鼻塞型, 大号L, 不带转接头			90

高流量

鼻氧管

鼻氧管 (HFNC) 结合加湿时具有许多优点,包括输送精准的高吸入气氧浓度 (FiO2) 和改善纤毛功能清除粘液,同时通过增加肺泡通气量提高患者舒适度和依从性。研究表明,高流量鼻腔疗法能够提供适量的气道正压,并可作为NIV到传统的O2传输设备的桥梁^[1]。



灵活可调节滑块

配备可调节滑块的绑带,可收拢管路。

柔软触感

专为儿童设计的柔软管材,顺应性好,佩戴更舒适。

抗弯折设计

防止气流堵塞,提高患者舒适度。

转接头

15/22mm多口径转接头,可连接市面上所有类型管路。

尺寸分色编码

可调节滑块分色设计,方便护士区分鼻氧管尺寸,适用不同体重段的儿童。

亲肤设计

侧翼硅胶材质可反复黏贴,亲肤稳定。

超薄贴纸

面部贴纸超薄设计,柔软不伤肤。

A detailed diagram of the high-flow nasal cannula. It shows the main tube with a blue connector at one end and a multi-lumen tube at the other. The multi-lumen tube has four colored segments (green, purple, yellow, red) corresponding to different sizes. A separate inset shows a close-up of the multi-lumen tube's connector. The main tube is shown with a white, flexible, and bendable design. A small inset shows the side wing of the cannula, which is made of soft silicone material.

备案号:粤东械备20190037号

注册型号	产品编码	产品描述	气流阻力	体重建议	最大流量	颜色	装箱数量
RVL003S	20504.00302.21502	鼻氧管,小号S,带转接头	< 2.0kPa, 9L/min	0.9-4 KG	9 L/min	●	100
	20504.00302.20502	鼻氧管,小号S,不带转接头				●	100
RVL003M	20504.00303.21502	鼻氧管,中号M,带转接头	< 2.0kPa, 10L/min	1-10 KG	10 L/min	●	100
	20504.00303.20502	鼻氧管,中号M,不带转接头				●	100
RVL003L	20504.00304.21502	鼻氧管,大号L,带转接头	< 2.0kPa, 23L/min	3-20 KG	23 L/min	●	100
	20504.00304.20502	鼻氧管,大号L,不带转接头				●	100
RVL003XL	20504.00305.21502	鼻氧管,加大号XL,带转接头	< 2.0kPa, 25L/min	5-30 KG	25 L/min	●	100
	20504.00305.20502	鼻氧管,加大号XL,不带转接头				●	100

参考文献

【1】 High Flow Nasal Oxygen Generates Positive Airway Pressure in Adult Volunteers. Groves N, Tobin A, Aust Crit Care. 2007 Nov;20(4): 126-31.

高流量

吸氧管(气切型)

气切型吸氧管在撤离通气控制期间,为主动呼吸的气管切开患者提供高浓度氧气治疗。
高流量氧疗(HFOT)已成为低氧血症型呼吸衰竭患者呼吸支持的关键模式,与传统的氧气疗法相比, HFOT被认为具有许多益处。

挂绳

挂绳设计以保持管子的位置。

材料

管路由特殊材料制成,可以有效减少冷凝水。

螺纹管路

为呼吸系统提供静音、灵活的连接。

转接头

专利设计,15/22mm多口径转接头,可连接市面上大部分不同尺寸管路。

蘑菇头型

有效防止痰液飞溅和污染。易于插拔,开放式吸痰操作。

通风格栅专利

可调节气道压力和加湿效果。

转接头

有效增加正压呼气末压力,并确保正压通气开放。



转接头



360°旋转头拥有自己的专利设计,以防止管道打结,保证安全使用。患者直接接触部分由大面积的医用液态硅胶材料制成,以确保安全和舒适。

备案号:粤莞械备20210007号

注册型号	产品编码	产品描述	最大流量	气流阻力(40L/min)	装箱数量
RVQ002G	20503.00201.20001	高流量吸氧管气切型,带转接头	60 L/min	< 3 cmH ₂ O	90
	20503.00201.21001	高流量吸氧管气切型,不带转接头			90

呼末二氧化碳采集吸氧管

呼末二氧化碳采集吸氧管在辅助二氧化碳等酸性气体吸收和采集的同时直接进行氧气输送。一体式分隔设计用于防止新鲜氧气与二氧化碳混合，避免管路扭结。

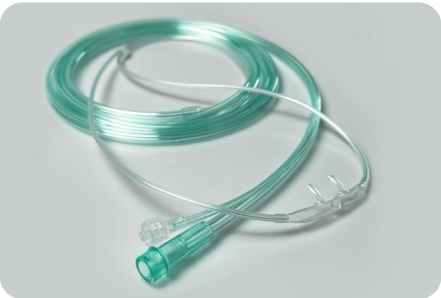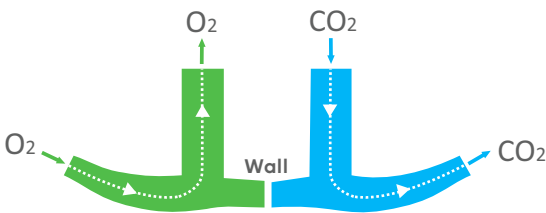


- 独特分隔式设计，一侧进氧，另一侧采集二氧化碳，以准确监测患者状况。
- 适用于成人、儿童和婴儿。
- 有两种鲁尔接头可供选择。

备案号:粤东械备20250093

注册型号	产品编码	产品描述	最大流量	气流阻力	装箱数量
RVL006	20901.00602.20601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 小号S, 公鲁尔接头	1.5 L/min	<2.0kPa, 1.5 L/min	50/盒 200/箱
	20901.00602.21601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 小号S, 母鲁尔接头			50/盒 200/箱
	20901.00603.20601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 中号M, 公鲁尔接头	3.0 L/min	<2.0kPa, 2.5 L/min	50/盒 200/箱
	20901.00603.21601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 中号M, 母鲁尔接头			50/盒 200/箱
	20901.00604.20601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 大号L, 公鲁尔接头	4.0 L/min	<2.0kPa, 4 L/min	50/盒 200/箱
	20901.00604.21601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 大号L, 母鲁尔接头			50/盒 200/箱



- 鲁尔接头与二氧化碳采集设备连接, 辅助二氧化碳等酸性气体的吸收和采集, 以准确监测患者状况。
- 适用于成人、儿童和婴儿。
- 有两种鲁尔接头可供选择。

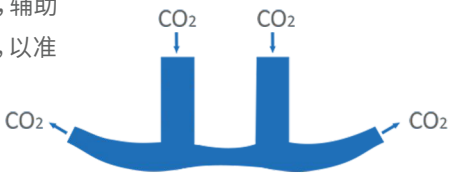

备案号:粤东械备20250093

注册型号	产品编码	产品描述	最大流量	气流阻力	装箱数量
RVL008	20901.00802.20601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 小号S, 公鲁尔接头	1.2 L/min	<2.0kPa, 1 L/min	50/盒 200/箱
	20901.00802.21601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 小号S, 母鲁尔接头			50/盒 200/箱
	20901.00803.20601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 中号M, 公鲁尔接头	1.5 L/min	<2.0kPa, 1 L/min	50/盒 200/箱
	20901.00803.21601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 中号M, 母鲁尔接头			50/盒 200/箱
	20901.00804.20601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 大号L, 公鲁尔接头	1.7 L/min	<2.0kPa, 1.7 L/min	50/盒 200/箱
	20901.00804.21601	呼末二氧化碳采集/吸氧管鼻头型, 大号L, 母鲁尔接头			50/盒 200/箱

HIGH FLOW HEATED BREATHING CIRCUITS


加热呼吸管路套装



嵌入式加热丝的优势

管路内壁光滑，整个管路长度内嵌入加热丝，这有助于最大限度地防止气体温度损失，从而减少冷凝现象。

沿管壁360°均匀加热

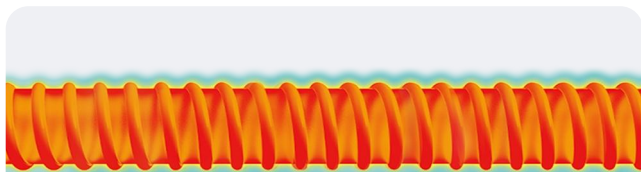

嵌入式外置螺旋加热丝贯穿整个管路，从外部到内部沿着管路的长度提供均匀加热效果。

- 管路360°全方位加热，几乎不产生冷凝水，避免细菌滋生
- 气阻更低，患者呼吸更顺畅
- 管路抗扭结，耐折耐压易储存



传统的波纹管加热丝悬浮于管路内部，只能加热部分管路呼吸气体，导致管路蓄积大量冷凝水。

360°全方位加热

有效湿度管理，减少冷凝水。

临床信心


减少打开或断开回路的需要及相关的PEEP损失以及肺部塌陷^[1]。

有效温度传递

防止气体温度下降和表面冷点，最大限度地减少凝结冷凝水。

低顺应性导管

准确地向患者输送指定气体流速。

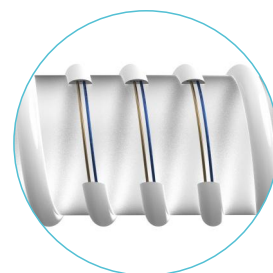


提高安全性

加强管路抗扭结，耐折耐压易储存。


降低风险

降低冷凝水意外进入患者呼吸道的风险^[2]。

可以集成2/3/4根
嵌入式螺旋加热丝。

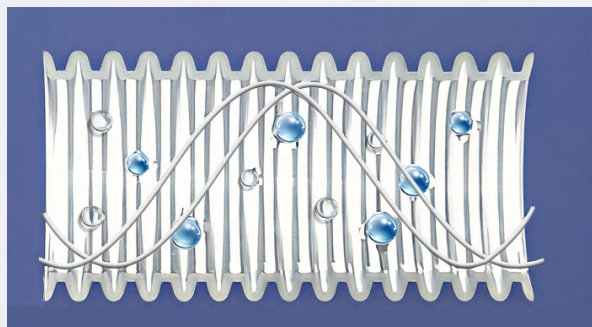

普通波纹加热丝回路，冷凝水在管路内部大量产生并蓄积。

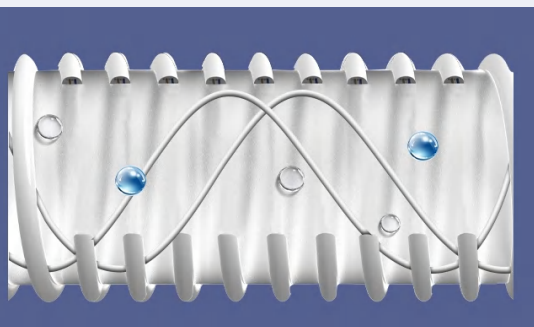

荣瑞嵌入式螺旋加热丝管路可减少冷凝水产生。

参考文献

- [1] Mallett, J.W Albarran, A Richardson. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Wiley Blackwell & Sons, Ltd. 2013.
- [2] AARC Evidence-based clinical practice guidelines: care of the ventilator circuit and its relation to ventilator-associated pneumonia. Respiratory Care 2003;48(9):869-879.

加热呼吸管路套装

一次性使用呼吸管路供单一患者使用,与呼吸机、呼吸湿化治疗仪配套使用,作为病人呼吸的通气管路,将不同氧浓度的干冷呼吸气体进行加温湿化并提供给患者。其中,湿化罐用于对输送给患者的呼吸气体进行加湿。

加热呼吸管路套装由机器端接头、加热螺纹管、管路接头、转接头(选配)、夹子(选配)湿化罐(选配)组成。

适用科室



呼吸科



ICU



急诊科



神经外科



心内科




神经内科



PACU



老年科

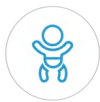

儿科



康复科



自动湿化罐

自动补液式湿化罐,避免短时间内反复加水的繁琐。

机器端接头

干冷呼吸气体进行加温。












嵌入式加热丝

贯穿整个管路的嵌入式加热丝集成设计,提供360°均匀加热,有效减少冷凝水。

抗弯折

合理的设计让管身柔韧有度,不易折损。

加热呼吸管路规格型号

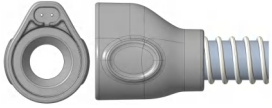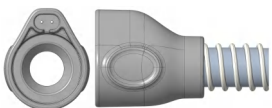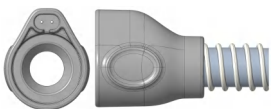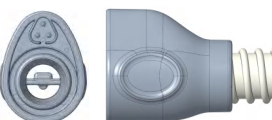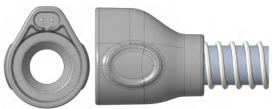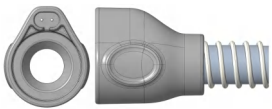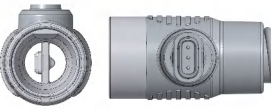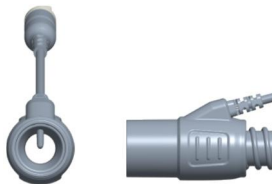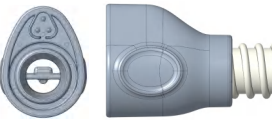产品型号	产品编码	机器端接头	产品配置	适用品牌	兼容型号
RVTH001	20101.00100.20001		机器端接头、1.8m加热 螺纹管、管路接头	F&P 科曼 驼人	AIRVO 2 NF1、NF2、NF3、NF5 TF1、TF2、TF3、TF5
RVTH002	20102.00200.21001		机器端接头、1.8m加热 螺纹管、管路接头、湿化 罐 (RVS001)、转接头	F&P 科曼 驼人	AIRVO 2 NF1、NF2、NF3、NF5 TF1、TF2、TF3、TF5
RVTH002-N1	20102.00200.20001		机器端接头、1.8m加热 螺纹管、管路接头、湿化 罐 (RVS002)、转接头	F&P 科曼 驼人	AIRVO 2 NF1、NF2、NF3、NF5 TF1、TF2、TF3、TF5
RVTH004	20102.00400.20001		机器端接头、1.8m加热 螺纹管、管路接头、湿化 罐 (RVS002)、转接头	迈思	HUMID-BHR、HUMID BHHUMID-BM、HUMID BHCUMID-BMC、HUMID BHEUMID-BH90、HUMID Bm90
RVTH006	20102.00600.20001		机器端接头、1.8m加热 螺纹管、管路接头、湿化 罐 (RVS002)、转接头	斯百瑞 (明康中锦)	OH-70C、OH-70B、OH-60A OH-50C、OH-50B、OH-30C OH-30B、OH-80S、OH-80Q OH-80L、OH-80K、OH-25S
RVTH011	20101.01100.20001		机器端接头、1.8m加热 螺纹管、管路接头	永胜	VUN-001
RVTH014	20102.01400.20001		机器端接头、1.8m加热 螺纹管、管路接头、湿化 罐 (RVS002)、转接头	卫圣康 2Pin	HFT-150 HFT-200 HFT-300
RVTH015	20101.01500.20001		机器端接头、1.8m加热 螺纹管、管路接头	和普乐 CA820M	CA820、CA820M、CA820W、BA825、BA825M BA825W、ST830、ST830MST830W、SV825M、 SV825W、AU830Pro、CP720、CA720W、CA720M、 CA720W-B、CA720、CA720WHB、CA720-HB、 CB725W、CB725M、BA720W、BA720M、 BA720W-B、BA725W、BA725M、BA725W-B、 ST720W、ST720M、ST720W-B、ST725W、ST725M ST725W-B、ST730W、ST730M、ST730W-B、 AU725W、AU725M、AU730W、AU730M、BA725、 ST730、BA525、BA525M、ST530、T530M、 ST520、ST520M、ST525、ST525M、CP520、 CA520、CA520M
RVTH015	20102.00600.20601		机器端接头、1.8m加热 螺纹管、管路接头、湿化 罐 (RVS003)、雾 化三通转接头	斯百瑞 (明康中锦)	OH-70C、OH-70B、OH-60A OH-50C、OH-50B、OH-30C OH-30B、OH-80S、OH-80Q OH-80L、OH-80K、OH-25S
RVTH016	20102.01600.20001		机器端接头、1.8m加热 螺纹管、管路接头、湿化 罐 (RVS002)、转接头	鱼跃	HF-80AP、HF-80AS、HF-80A、 HF-75AP、HF-75AS、HF-75A HF-70A、HF-60、AHF-75M、 HF-70M、HF-60M

湿化罐

作为完整呼吸系统的一部分，与湿化器、呼吸管路配套使用，将干冷气体进行加温湿化，送入接受呼吸支持患者的呼吸道。
荣瑞提供多种湿化罐，与加热呼吸管路配套兼容。

360°可观察水位

罐体透明设计，方便医护人员观察水位。

罐体V型专利设计

在水罐内部形成环形通道，使气流紧贴水面流过，减少气体涡流，减小气流阻力，提升湿化水平。

快速加热

采用全金属材料导热板，减少加热时间。

输液管收纳

提供更合理的输液管收纳设计，更大弯折弧度，避免输液管弯折。

浮阀结构

水位通过浮漂维持，当达到最高水位线时关闭进水口，使用更安全。



自动注水湿化罐
(含注水装置)



自动注水湿化罐
(含注水装置)



自动注水湿化罐
(矮罐含注水装置)



注册证号：粤械注准20252080678

注册型号	产品编码	产品描述	初始储水量	总容积	罐体尺寸 (mm)	接头尺寸 (mm)	最大水位线容量	装箱数量
RVS001	20701.00100.20001	自动注水湿化罐(含输液管)	90mL~150ml	430ml	120 * 87.5	ISO 5356-1 (22mm)	160mL±15ml	60
RVS001	20701.00100.21001	自动注水湿化罐(含输液管、 湿化罐转接头)	90mL~150ml	430ml	120 * 87.5	ISO 5356-1 (22mm)	160mL±15ml	60
RVS002	20702.00200.20001	自动注水湿化罐(含输液管)	90mL~150ml	360ml	120 * 87.5	ISO 5356-1 (22mm)	160mL±15ml	60
RVS002	20702.00200.21001	自动注水湿化罐(含输液管、 湿化罐转接头)	90mL~150ml	360ml	120 * 87.5	ISO 5356-1 (22mm)	160mL±15ml	60
RVS003	20703.00300.20001	自动注水湿化罐(矮罐含输液管)	90mL~150ml	260ml	120 * 66.5	ISO 5356-1 (22mm)	160mL±15ml	72

无创呼吸面罩

荣瑞无创呼吸面罩是用于非侵入性通气的舒适医用面罩。

面罩有小号、中号和大号尺寸可供选择，以适合各种患者。

包装内提供尺码指南，帮助患者选择合适尺寸的面罩。



材质轻便

提升患者舒适度。

可调节头带

可调节头带尺寸，适合大多数患者。

360°旋转接头

确保患者自由活动
时舒适。

卡扣式设计


操作简单，可调节头带和
面罩连接，使面罩可以快
速从患者面部移除。

多功能检查孔


支持支气管镜、吸痰管等检查操作，
帮助患者持续无创通气(NIV)治疗。
同时支持吸引导管及其他治疗。

柔软的硅胶材质

确保最佳舒适度。

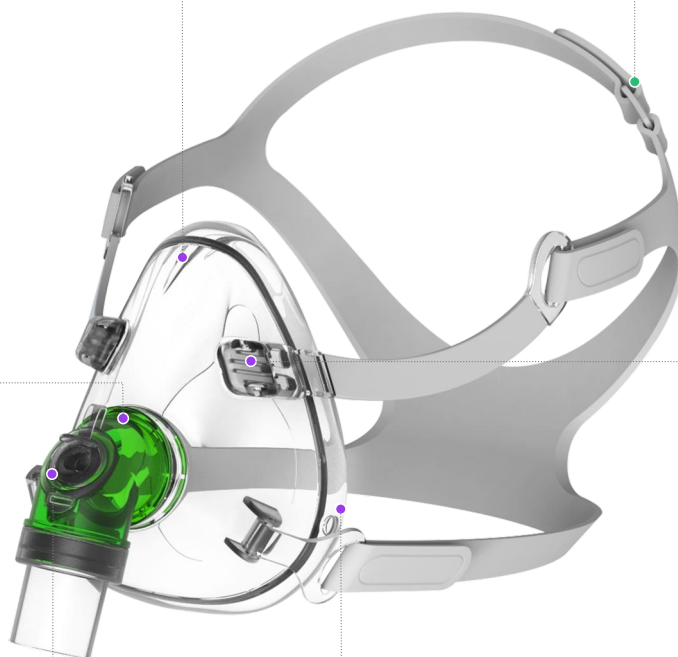

产品功能

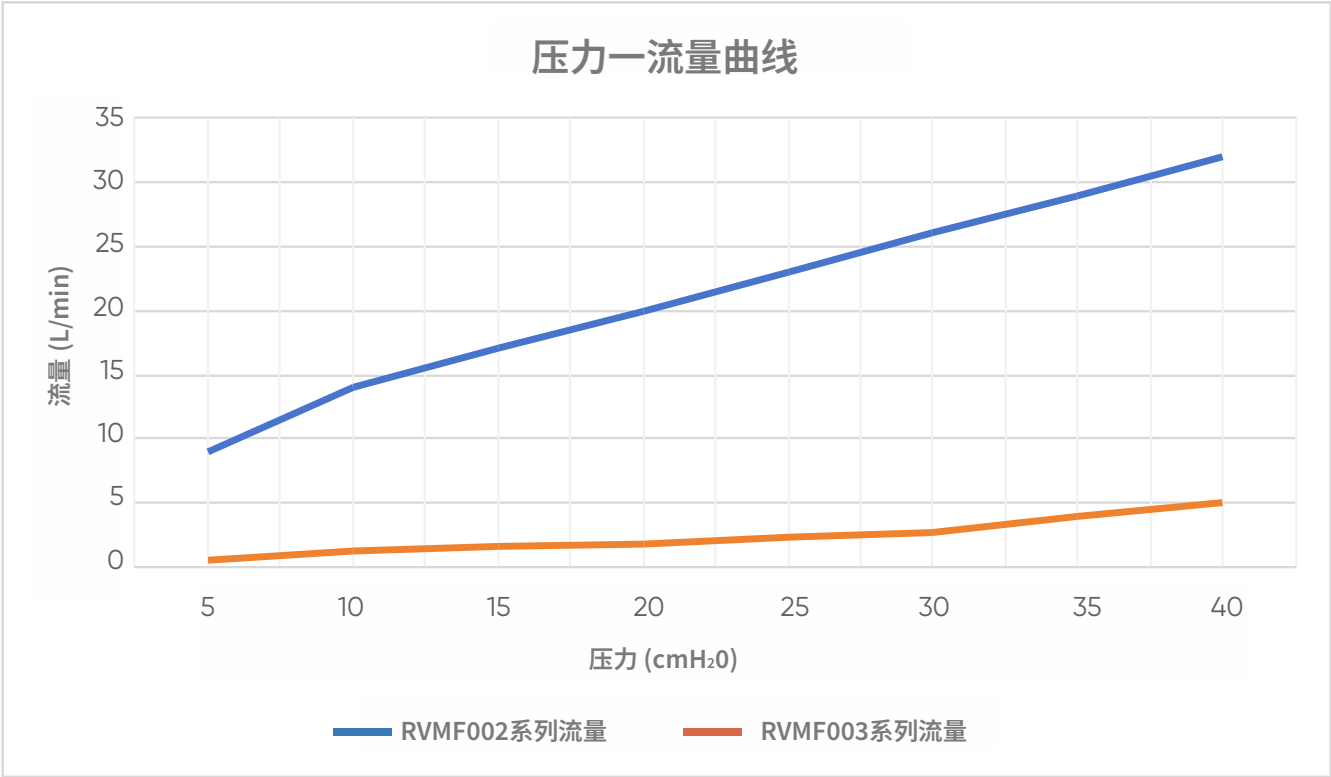

压力 (cmH ₂ O)	3	12	22	31	40
RVMF002系列流量(L/min)	7	16	19	27	32
RVMF003系列流量(L/min)	0.5	1.4	2	3	5

注册证号:粤械注准20252080861

注册型号	产品编码	产品描述	弯接头颜色	装箱数量
RVMF002S	20602.00202.21001	无创呼吸面罩, 小号S, 绿色弯接头【NIV】	●	54
RVMF002M	20602.00203.21001	无创呼吸面罩, 中号M, 绿色弯接头【NIV】	●	54
RVMF002L	20602.00204.21001	无创呼吸面罩, 大号L, 绿色弯接头【NIV】	●	54
RVMF003S	20602.00302.22001	无创呼吸面罩, 小号S, 蓝色弯接头【NIV】	●	54
RVMF003M	20602.00303.22001	无创呼吸面罩, 中号M, 蓝色弯接头【NIV】	●	54
RVMF003L	20602.00304.22001	无创呼吸面罩, 大号L, 蓝色弯接头【NIV】	●	54

DISPOSABLE VENTILATOR BREATHING CIRCUITS

加热呼吸管路套装




加热呼吸管路套装

使用范围


与呼吸供气设备配套,将呼吸用的气体或气体混合物输送给患者。
加热呼吸管路的同时对输送的气体保温,防止冷凝水产生时使用。

产品优势

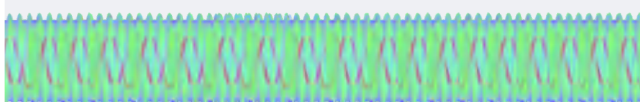

传统的波纹管加热丝悬浮于管路内部,只能加热部分管路呼吸气体,导致管路蓄积大量冷凝水。

VS

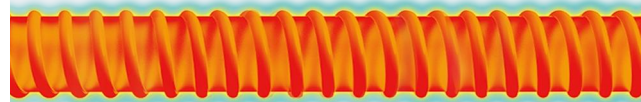

嵌入式外置螺旋加热丝贯穿整个管路,从外部到内部沿着管路的长度提供均匀加热效果。

- 管路360°全方位加热,几乎不产生冷凝水,避免细菌滋生
- 气阻更低,患者呼吸更顺畅
- 管路抗扭结,耐折耐压易储存

360°全方位加热

有效湿度管理,减少冷凝水。

临床信心


减少打开或断开回路的需要及相关的PEEP损失以及肺部塌陷^[1]。

有效温度传递

防止气体温度下降和表面冷点,最大限度地减少凝结冷凝水。

低顺应性

准确地向患者输送指定气体流速。


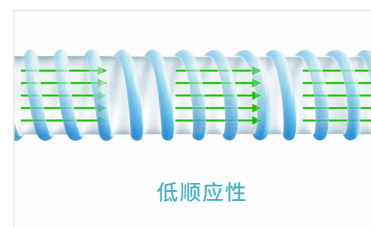


提高安全性


加强管路抗扭结,耐折耐压易储存。

降低VAP风险

降低冷凝水意外进入患者呼吸道的风险^[2]。

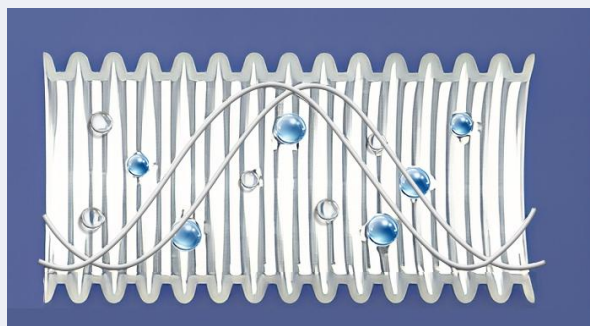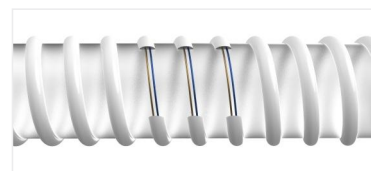

普通波纹加热丝回路,冷凝水在管路内部大量产生并蓄积。

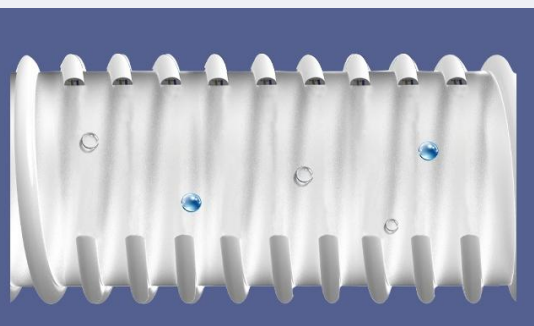



荣瑞嵌入式外置螺旋加热丝管路,可减少冷凝水产生。

参考文献

- [1] Mallett, J.W Albarran, A Richardson. Critical Care Manual of Clinical Procedures and Competencies. Wiley Blackwell & Sons, Ltd. 2013.
- [2] AARC Evidence-based clinical practice guidelines: care of the ventilator circuit and its relation to ventilator-associated pneumonia. Respiratory Care 2003;48(9):869-879.







规格型号

ID:19mm

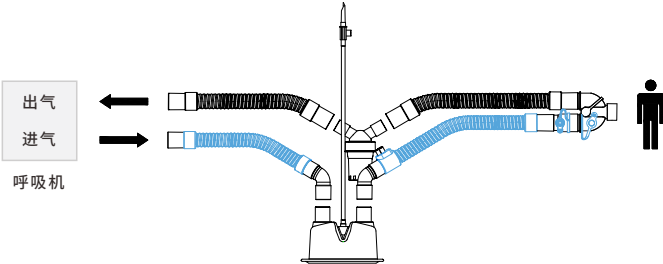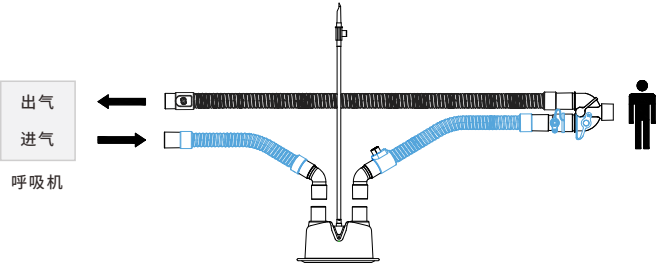



注册证号:粤械注准20262080185

注册型号	产品编码	产品描述	图示	装箱数量
RVTH201AT	20201.20111.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、集水杯、湿化罐 (RVS002)、测压管、管路夹、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (2个、22M-22M/15F、22M/15F-15M)		10
RVTH201AP	20201.20112.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、集水杯、测压管、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (2个、22M-22M/15F、22M/15F-15M)		10
RVTH201AJ	20201.20113.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、集水杯、盖帽、Y型接头、转接头 (2个、22M-22M/15F、22M/15F-15M)		10
RVTH202AT	20202.20211.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、湿化罐 (RVS002)、测压管、管路夹、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (2个、22M-22M/15F、22M/15F-15M)		10
RVTH202AP	20202.20212.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、测压管、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (2个、22M-22M/15F、22M/15F-15M)		10
RVTH202AJ	20202.20213.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、盖帽、Y型接头、转接头 (2个、22M-22M/15F、22M/15F-15M)		10

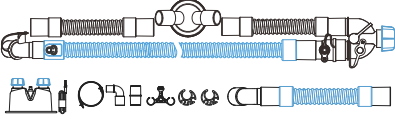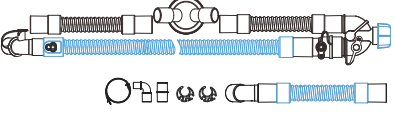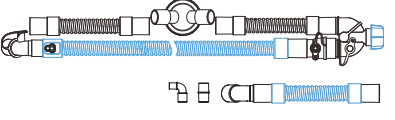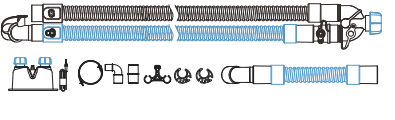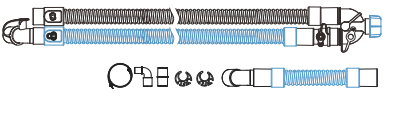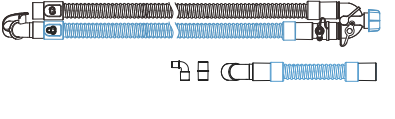注册型号	产品编码	产品描述	图示	装箱数量
RVTH201AT	20211.20111.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、集水杯、湿化罐 (RVS002)、测压管、管路夹、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (2个、22M-22M/15F、22M/15F-15M)		10
RVTH201AP	20211.20112.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、集水杯、测压管、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (2个、22M-22M/15F、22M/15F-15M)		10
RVTH201AJ	20211.20113.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、集水杯、盖帽、Y型接头、转接头 (2个、22M-22M/15F、22M/15F-15M)		10
RVTH202AT	20212.20211.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、湿化罐 (RVS002)、测压管、管路夹、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (2个、22M22M/15F、22M/15F-15M)		10
RVTH202AP	20212.20212.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、测压管、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (2个、22M-22M/15F、22M/15F-15M)		10
RVTH202AJ	20212.20213.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、盖帽、Y型接头、转接头 (2个、22M-22M/15F、22M/15F-15M)		10





规格型号

ID:15mm

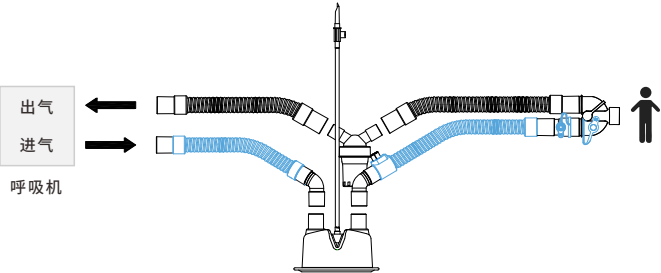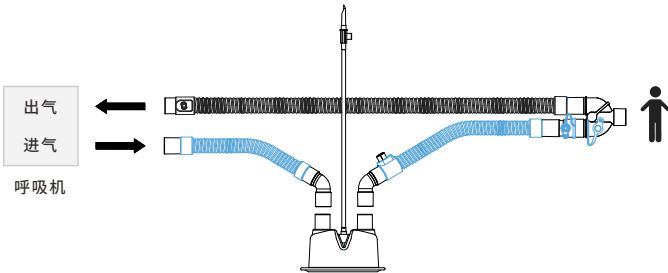



注册证号：粤械注准20262080185

注册型号	产品编码	产品描述	图示	装箱数量
RVTH203IT	20203.20311.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、集水杯、湿化罐 (RVS002)、测压管、管路夹、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (1个、22M/15F-15M)		10
RVTH203IP	20203.20312.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、集水杯、测压管、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (1个、22M/15F-15M)		10
RVTH203IJ	20203.20313.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、集水杯、盖帽、Y型接头、转接头 (1个、22M/15F-15M)		10
RVTH204IT	20204.20411.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、湿化罐 (RVS002)、测压管、管路夹、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (1个、22M/15F-15M)		10
RVTH204IP	20204.20412.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、测压管、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (1个、22M/15F-15M)		10
RVTH204IJ	20204.20413.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、盖帽、Y型接头、转接头 (1个、22M/15F-15M)		10

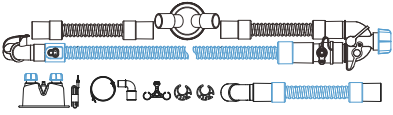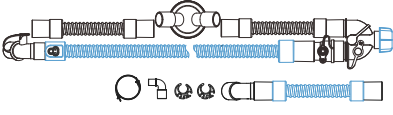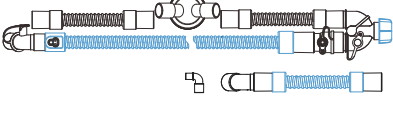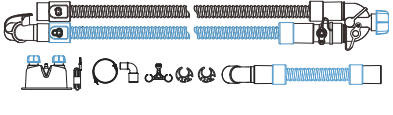注册型号	产品编码	产品描述	图示	装箱数量
RVTH203IT	20213.20311.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、集水杯、湿化罐 (RVS002)、测压管、管路夹、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头(1个、22M/15F-15M)		10
RVTH203IP	20213.20312.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、集水杯、测压管、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (1个、22M/15F-15M)		10
RVTH203IJ	20213.20313.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、集水杯、盖帽、Y型接头、转接头 (1个、22M/15F-15M)		10
RVTH204IT	20214.20411.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、湿化罐 (RVS002)、测压管、管路夹、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (1个、22M/15F-15M)		10
RVTH204IP	20214.20412.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、测压管、测压管夹x2、盖帽、Y型接头、测温接头、转接头 (1个、22M/15F-15M)		10
RVTH204IJ	20214.20413.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、盖帽、Y型接头、转接头 (1个、22M/15F-15M)		10

规格型号

ID:12mm

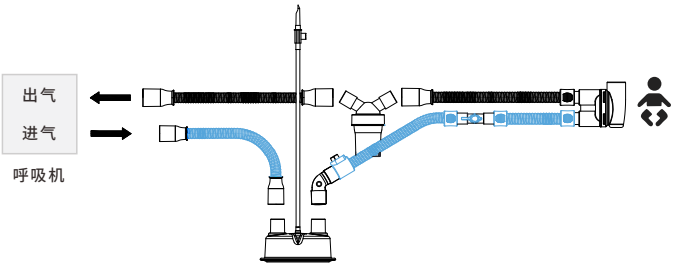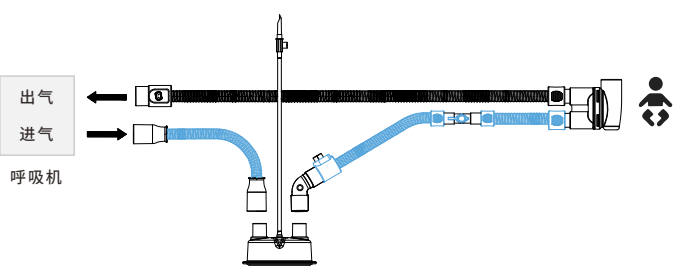

注册证号：粤械注准20262080185

注册型号	产品编码	产品描述	图示	装箱数量
RVTH205NT	20205.20511.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、集水杯、转接头、湿化罐 (RVS003)、测压管、Y型接头		10
RVTH205NP	20205.20512.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、集水杯、测压管、转接头、Y型接头		10
RVTH206NT	20206.20611.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、转接头、湿化罐 (RVS003)、测压管、Y型接头		10
RVTH206NP	20206.20612.20001	机器端接头、螺纹管、管路接头、测压管、转接头、Y型接头		10
RVTH205NT	20215.20511.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、集水杯、转接头、湿化罐 (RVS003)、测压管、Y型接头		10
RVTH205NP	20215.20512.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、测压管、集水杯、转接头、Y型接头		10
RVTH206NT	20216.20611.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、转接头、湿化罐 (RVS003)、测压管、Y型接头		10
RVTH206NP	20216.20612.20001	机器端接头、外覆膜螺纹管、管路接头、测压管、转接头、Y型接头		10

BREATHING CIRCUITS COMPONENTS



呼吸回路配件



呼吸回路配件

转接头是呼吸治疗系统中不可或缺的关键组件，能确保管路及设备端与患者端之间连接稳定。其采用优质材料制成，为患者的呼吸治疗提供安全可靠的保障。

转接头



MAG1378



MAG2204



MAG2152



MAG1986



MAG1987



MAG2049



MAG2050



MAG2051



MAG2052



MAG2056



MAG2075



MAG2089



MAG1990



MAG1996



MAG2055



MAG2059




MAG2060



MAG2110



MAG2261

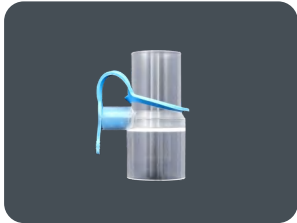

MBG1514

物料编码	产品描述	数量
MAG2204	直接头22F-22F	50
MAG1378	Y 型件盖帽 22F	50

物料编码	产品描述	数量
MAG2152	湿化罐弯接头适用于RVTH002套组	50
MAG1986	直接头 15M-15M	50

物料编码	产品描述	数量	物料编码	产品描述	数量
MAG1987	直接头 22M-22M/15F	50	MAG1990	直接头 22F-OD18.6	50
MAG2049	直接头 15M-OD7.84	50	MAG1996	直接头 22F-OD14.6	50
MAG2050	直接头 15M-OD14.4	50	MAG2055	直接头 12F-12M	50
MAG2051	直接头 15F-22F	50	MAG2059	直接头 12M-12M	50
MAG2052	直接头 22M-22F	50	MAG2060	直接头 22F-12M	50
MAG2056	带鲁尔端口的测压接口 12F-12M	50	MAG2110	直接头 22M-22M	50
MAG2075	黄色直接头 12M-12F	50	MAG2261	直接头 22F-15M	50
MAG2089	O ₂ 直接头 22M/15M-6		MBG1514	带测温孔和盖帽22F/22M	50

Y型件



MAG2267



MAG2268



MAG1376



MAG1441



MBG1426

T型接头



MAG2064

Part	Description	Qty
MAG2267	平行Y型件带MDI和压力监测口	50
MAG2268	平行Y型件带MDI口	50
MAG1376	平行Y型件带MDI口	50

Part	Description	Qty
MAG1441	带监测端口平行Y型件 22M	50
MBG1426	带吸入端口平行Y型件	50
MAG2064	直接头带孔和盖帽12M-12M	50

弯接头



MAG1988



MAG1989



MAG2022

物料编码	产品描述	数量
MAG1988	弯接头 22M/15F-15M	50
MAG1989	带鲁尔端口弯接头 15M-22M/15F	50

物料编码	产品描述	数量
MAG2022	弯接头 22F-22F	50


输液管



MAG1993



MAG1994

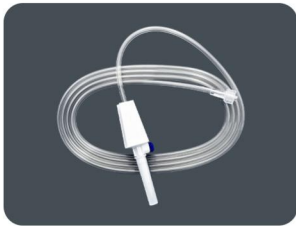

MAF0364

物料编码	产品描述	数量
MAG1993	弯接头带孔和盖帽 22M-22F	50
MAG1994	120°弯接头 22M-22F	50

物料编码	产品描述	数量
MAF0364	输液管	50

测压管



MAF0466



MBG1430




MAG1374

物料编码	产品描述	数量
MAF0466	测压管	50
MBG1430	测压管套件	50

物料编码	产品描述	数量
MAG1374	测压管支架	50

管路支架

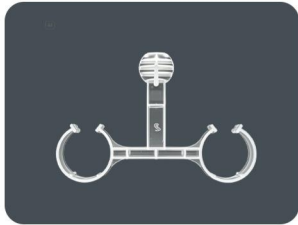

MAG1375



MAG1379

物料编码	产品描述	数量
MAG1375	呼吸管路支架	50

物料编码	产品描述	数量
MAG1379	集水杯-22mm	50



北京荣瑞世纪科技有限公司

地址: 北京市海淀区丰贤中路7号院
1号楼三层西区

Tel: +86 4008988660



东莞荣瑞医疗器械有限公司

地址: 广东省东莞市松山湖园区桃园路1号
5栋101室

Tel: +86 769 22243880



Web: www.conruimedical.com www.r-rui.com



E-mail: info@conruimedical.com